



CuraPro

Fußteilentlastungs-, Verband- und Therapieschuhe

Hilfsmittelverzeichnis:

Vorfußentlastungsschuhe
31.03.03.5011

Fersenentlastungsschuhe
31.03.03.5012

Verbandsschuhe Langzeit
31.03.03.4001/2

KLINISCH
GEPRÜFT

CE

THANNER
SCHÄFTE
und mehr

Lebensqualität

Bewegung steigert die Lebensqualität und bedeutet Unabhängigkeit. Durch verschiedenste Verletzungen, Krankheiten und Frakturen kann die Mobilität eingeschränkt sein.

Die Lösung

CuraPro – die Langzeit-Verbandschuhe, Fußteilentlastungsschuhe und Therapieschuhe von THANNER geben Ihnen wieder die Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben.

Medizinprodukt

Die THANNER CuraPro Spezialschuhe sind ein Medizinprodukt der Klasse I MDR Anhang VIII, Anwendung MDR Anhang IV mit CE-Kennzeichnung.

Die verwendeten Materialien wurden auf Unbedenklichkeit, Karzinogenität und Toxikologie untersucht.

Made in Germany

Alle CuraPro Spezialschuhe werden im eigenen Haus in Höchstädt an der Donau mit über 250 Mitarbeitern hergestellt. Qualität Made in Germany.

Klinisch geprüft

Die Wirksamkeit der CuraPro Verbandschuhe Langzeit und der Fußteilentlastungsschuhe wurde in verschiedenen klinischen Anwendungsbeobachtungen geprüft.

Hilfsmittelnummern

Fußteilentlastungsschuhe:

Cabrio/Campus/Cambridge/Canterbury: 31.03.03.5011
Colmar/Comet/Concept: 31.03.03.5012

Verbandschuhe Langzeit:

Calypso/Colombo: 31.03.03.4001
Caprice/Clavigo: 31.03.03.4002

26 Jahre Erfahrung

Seit über 26 Jahren stellt die Firma THANNER Verbandschuhe und Fußteilentlastungsschuhe her. Die Erfahrungen und der enge Kontakt zu namhaften Fachärzten und Orthopädie-Schuhtechnikern führten zu einer stetigen Verbesserung. Heute stehen Ihnen Produkte zur Verfügung, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Fachhandel

CuraPro Spezialschuhe sind ausschließlich über den Fachhandel (Orthopädienschuhtechnik, Sanitätsfachhandel, Orthopädietechnik) erhältlich. Der Orthopädienschuhmacher oder Orthopädietechniker gewährt Ihnen eine optimale Anpassung des Hilfsmittels und die Möglichkeit, die Einlegesohle oder den Schuh zu modifizieren.

Für linke und rechte Füße

CuraPro Spezialschuhe sind eine der einzigen, die für linke und rechte Füße produziert werden. Dadurch haben Sie einen optimalen Halt und die Wunden können schneller abheilen.

Maßkonfektion


Längere Klettverschlüsse, andere Schaftmaße, Unpaare und sonstige Sonderanfertigungen können selbstverständlich gegen einen kleinen Aufpreis bestellt werden.

Qualitäts- und Umweltmanagement

Die Firma THANNER ist nach DIN EN ISO 13485:2016 für Medizinprodukte und DIN EN ISO 14001:2015 für die Umwelt zertifiziert. Dies garantiert Ihnen geprüfte Materialien in bester Qualität und strukturierte Fertigungsprozesse. Bei der Herstellung der Produkte achten wir auf Nachhaltigkeit und berücksichtigen umweltrelevante Aspekte.

Druckmessung

Für die Herstellung, bzw. Weiterentwicklung der CuraPro Spezialschuhe verwenden wir das Druckmess-System „Pedar“ der Firma Novel. Dadurch ist es uns möglich, die maximale Druckentlastung für einen Standard-Schuh zu schaffen.

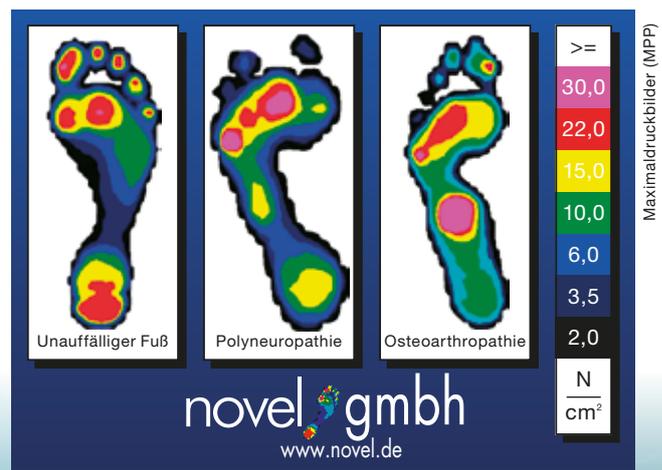

	Vorwort	01
	Fußteilentlastungsschuhe Damen und Herren	03-06
	Verbandsschuhe Langzeit Damen und Herren	07-08
	Einlegesohlen „Pentagon“ Damen und Herren	09-10
	Heilbronner Abrollschuhe Damen und Herren	11-12
	Wundnetz Damen und Herren	13
	Therapieschuhe Damen und Herren	14
	Spezial- und Amputationssocken Damen und Herren	15-17
	Modellverzeichnis	18

So leicht ...

CuraPro by THANNER



Fußteilentlastungsschuhe

konzentrieren die Auftrittsbelastung auf den belastbaren Teil des Fußes. Der Stoßschutz dient zur Sicherung der Zehen. Zur Totalentlastung kann die Polstersohle im Vorfuß durchgefäst werden. Weite Öffnungsmöglichkeit und individuelle Regulierung des Verschlusses; sichere Fixierung des Schuhs an der Auftrittsfläche des Fußes. Hautfreundliche Materialien mit Schadstoffprüfung oder Biokompatibilitätstest. Einer der einzigen Schuhe, der links und rechts gefertigt wird (nicht einballig), dadurch besserer Fersenhalt. **Links und rechts einzeln lieferbar.**

Besonderheiten

- Die Fußteilentlastungsschuhe werden für linke und rechte Füße gefertigt (nicht einballig). Daher geben diese Schuhe einen besseren Halt und die Wunden oder Verletzungen können schneller abheilen.
- Medizinprodukt der Klasse I MDR Anhang VIII, Anwendung MDR Anhang IV mit CE-Kennzeichnung
- 1 cm starke Polstersohle zum Herausnehmen
- Stückweise lieferbar
- Schadstoffgeprüfte Materialien, zum Teil auch mit Biokompatibilitätstest

Sonderanfertigungen

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
 - Links andere Weite oder Größe als rechts
 - Unter- oder Übergrößen
 - Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

Indikation

Postoperative oder sonstige Wundprozesse, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. auch gepolsterten Verbänden, deren Heilungsverlauf über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt.

Rezeptierung

- 1 Vorfußentlastungsschuh
CuraPro (DIABETICUS+RHEUMATICUS®)
Cabrio/Campus/Cambridge/Canterbury
- 1 Fersenentlastungsschuh
CuraPro (DIABETICUS+RHEUMATICUS®)
Colmar/Comet/Concept

Hilfsmittelnummer

Cabrio/Campus/Cambridge/Canterbury: 31.03.03.5011
Colmar/Comet/Concept: 31.03.03.5012

Bitte benutzen Sie die hier aufgeführte Brandsohlenschablone zur Feststellung der richtigen Größe und Weite!

Leisten 900	34 - 42	41 - 47	DAMEN HERREN	COLMAR, COMET CONCEPT	Brandsohlenumriss Fersenentlastungsschuh, Verbandschuh Langzeit
	SS, S, M				
Leisten 910	34 - 42	41 - 47	DAMEN HERREN	CABRIO, CAMPUS CAMBRIDGE CANTERBURY	Brandsohlenumriss Vorfußentlastungsschuh, Stumpfverbandschuh



Fersentlastungsschuhe

IM HEIL- UND HILFSMITTELKATALOG:

Colmar/Comet/Concept: 31.03.03.5012



Durch die Fertigung für **links und rechts** ergibt sich eine bessere Passform und ein schnelleres Abheilen der Wunden.

1	COMET 900 Fersentlastungsschuh 4.2010 • Weite M • links 4.2011 • Weite M • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin thermoplastische Hinterkappe
----------	--

2	CONCEPT 900 Fersentlastungsschuh 4.2037 • Weite M • links 4.2038 • Weite M • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) marine/ozean Space/Aquarin thermoplastische Hinterkappe
----------	---

3	COLMAR 900 Fersentlastungsschuh 4.2012 • Weite M • links 4.2013 • Weite M • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin Futter Diasoft-3D Versteifung im Knöchelbereich
----------	--

Hallux valgus Entlastungsschuh



1

Vorfußentlastungsschuhe

IM HEIL- UND HILFSMITTELKATALOG:

Cabrio/Campus/Cambridge/Canterbury: 31.03.03.5011



2



3



4

REGENKAPPE

5

6



7



Durch die Fertigung für **links und rechts** ergibt sich eine bessere Passform und ein schnelleres Abheilen der Wunden.

1	CAMBRIDGE 910 Hallux valgus Entlastungsschuh 4.2003 • links 4.2004 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin
2	CABRIO 910 Vorfußentlastungsschuh 4.2000 • links 4.2001 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin Futtertasche in der Ferse

3	CAMPUS 910 Vorfußentlastungsschuh 4.2005 • links 4.2006 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin Futter Diasoft-3D
4	CANTERBURY 910 Vorfußentlastungsschuh 4.2039 • links 4.2040 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) marine/ozean Space/Aquarin

	REGENKAPPE für Vorfußentlastungsschuhe Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.)
5	4.9859 • links/rechts oliv Space
6	4.9862 • links/rechts marine Space
7	CANTERBURY 910 Vorfußentlastungsschuh 4.2041 • links 4.2042 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) oliv/schwarz Space/Hydro-Nappa



Verbandschuhe Langzeit

(mehrmonatige Verwendung)

dienen zur frühzeitigen Gehfähigkeit bei notwendigen und umfangreichen Verbänden im Fuß- und Beinbereich und gegebener Belastbarkeit des Restfußes und zum Schutz von Verbänden gegen äußere Einflüsse.

Weite Öffnungsmöglichkeit und individuell regulierbarer Verschluss, Zurichtungsmöglichkeit des Obermaterials, Zurichtungsmöglichkeit im Bodenbereich.

Verwendung von unbedenklichen Materialien hinsichtlich Karzinogenität und Toxikologie, hautfreundliches Material = waschbar. **Links und rechts einzeln lieferbar.**

Besonderheiten

- Die Verbandschuhe werden für linke und rechte Füße gefertigt (nicht einballig). Daher geben diese Schuhe einen besseren Halt und die Wunden und Verletzungen können schneller abheilen.
- Medizinprodukt der Klasse I MDR Anhang VIII, Anwendung MDR Anhang IV mit CE-Kennzeichnung
- 1 cm starke Polstersohle zum Herausnehmen
- Stückweise lieferbar
- Schadstoffgeprüfte Materialien, zum Teil auch mit Biokompatibilitätstest

Sonderanfertigungen

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

Indikation

Postoperative oder sonstige Wundprozesse, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. auch gepolsterten Verbänden, deren Heilungsverlauf über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt.

Rezeptierung

1 Verbandschuh Langzeit
CuraPro (DIABETICUS+RHEUMATICUS®)

Hilfsmittelnummer

Calypso/Colombo: 31.03.03.4001
Caprice/Clavigo: 31.03.03.4002

Bitte benutzen Sie die hier aufgeführte Brandsohlenschablone zur Feststellung der richtigen Größe und Weite!

Leisten 900	34 - 42	41 - 47	DAMEN HERREN	CALYPSO, CAPRICE COLOMBO, CLAVIGO	Brandsohlenumriss Fersenentlastungsschuh, Verbandschuh Langzeit
	SS, S, M				
Leisten 910	34 - 42	41 - 47	DAMEN HERREN	CABRIO, CAMPUS CAMBRIDGE CANTERBURY	Brandsohlenumriss Vorfußentlastungsschuh, Stumpfverbandschuh

Verbandschuhe Langzeit

Durch die Fertigung für **links und rechts** ergibt sich eine bessere Passform und ein schnelleres Abheilen der Wunden.



REGENKAPPE

IM HEIL- UND HILFSMITTELKATALOG:

Calypso/Colombo Nr. 31.03.03.4001
Caprice/Clavigo Nr. 31.03.03.4002

Stumpfverbandsschuh

BRANDSOHLENLÄNGE


GRÖSSE	CHOPART	LISFRANC
34/35	14,0 cm	16,9 cm
36/37	14,8 cm	17,3 cm
38/39	15,7 cm	18,6 cm
40/41	16,6 cm	19,4 cm
42/43	17,4 cm	20,3 cm
44/45	18,3 cm	21,2 cm
46/47	19,1 cm	22,0 cm



1	COLOMBO 900 Verbandschuh Langzeit 4.2045 • links 4.2046 • rechts Gr. 34-47 • Weite M marine/ozean Space/Aquarin thermoplastische Hinterkappe
2	CALYPSO 900 Verbandschuh Langzeit 4.1020 • links 4.1022 • rechts Gr. 34-47 • Weite M ozean Aquarin thermoplastische Hinterkappe

3	CAPRICE 900 Verbandschuh Langzeit 4.1030 • links 4.1032 • rechts Gr. 34-47 • Weite M ozean Aquarin Futtertasche in der Ferse
4	REGENKAPPE für Verbandschuhe Langzeit 4.9864 • links/rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) marine Space

5	CLAVIGO 900 Verbandschuh Langzeit 4.2043 • links 4.2044 • rechts Gr. 34-47 • Weite M marine/ozean Space/Aquarin
6	CHOPART 910 Stumpfverbandsschuh 4.2015 • links 4.2016 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin Futtertasche in der Ferse
7	LISFRANC 910 Stumpfverbandsschuh 4.2017 • links 4.2018 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) ozean Aquarin Futtertasche in der Ferse

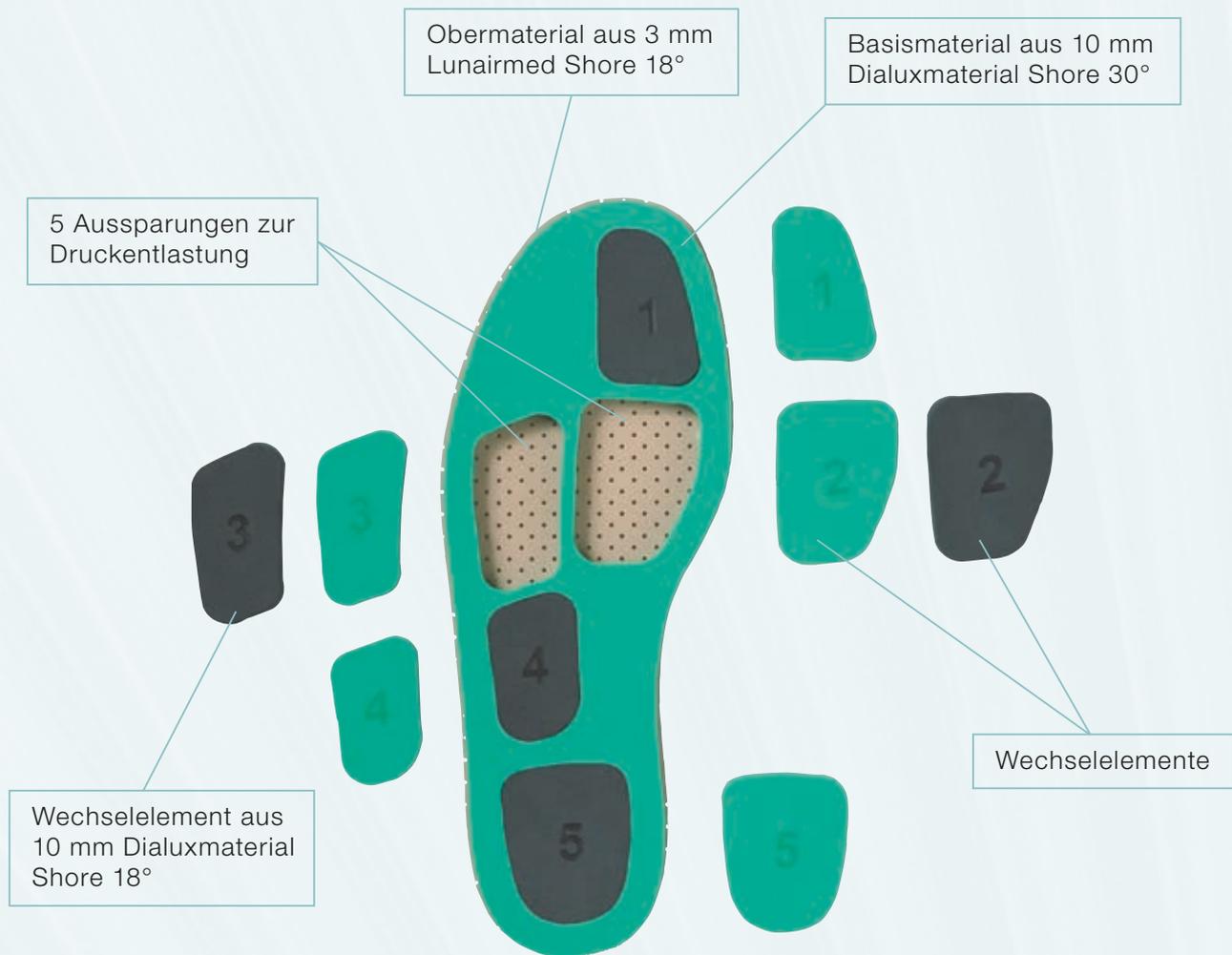

Die „Pentagon“ Einlegesohle kann für die Schuhmodelle Canterbury (Vorfußentlastungsschuh), Clavigo und Colombo (Verbandschuhe Langzeit) als Zubehör bestellt werden.

Durch den Wechsel der Einsätze in die geringere Shorehärte 18° kann eine Druckentlastung erreicht werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, das Element komplett zu entfernen, um eine noch größere Entlastung zu schaffen.

Für ein maximales Körpergewicht von 100 kg ausgelegt!

Die schnelle Druckentlastung ohne Werkzeuge!

Super Tipp
von Thanni:

Druckentlastung
ohne Werkzeug!



Zur Serienausstattung einer „Pentagon“
Einlegesohle gehören 5 Wechselelemente
in Shore 30° und Shore 18°



„Pentagon“ Einlegesohlen

1	PENTAGON 910 FÜR CANTERBURY 4.4016 • links 4.4017 • rechts Gr. 34/35 bis 46/47 (Doppelgr.) 3 mm Lunairmed Shore 18° 10 mm Dialux Shore 30° 10 mm Dialux Shore 18°
----------	--

2	PENTAGON 900 FÜR CLAVIGO/COLOMBO 4.4018 • links 4.4019 • rechts Gr. 34 bis 47 3 mm Lunairmed Shore 18° 10 mm Dialux Shore 30° 10 mm Dialux Shore 18°
----------	---



Heilbronner Abrollschuh

(Verbandschuh Langzeit auf biomechanischer Grundlage)

dient zur frühzeitigen Gehfähigkeit bei notwendigen und umfangreichen Verbänden im Fuß- und Beinbereich und gegebener Belastbarkeit des Restfußes und zum Schutz von Verbänden gegen äußere Einflüsse. Weite Öffnungsmöglichkeit und individuell regulierbarer Verschluss, Zurichtungsmöglichkeit des Obermaterials, Zurichtungsmöglichkeit im Bodenbereich. Verwendung von unbedenklichen Materialien hinsichtlich Karzinogenität und Toxikologie, hautfreundliches Material = waschbar (Biokompatibilitätstest).

Links und rechts einzeln lieferbar.

Besonderheiten

- Die Heilbronner Abrollschuhe werden für linke und rechte Füße gefertigt (nicht einballig). Daher geben diese Schuhe einen besseren Halt und die Wunden oder Verletzungen können schneller abheilen.
- Medizinprodukt der Klasse I MDR Anhang VIII, Anwendung MDR Anhang IV mit CE-Kennzeichnung
- Stückweise lieferbar
- Schadstoffgeprüfte Materialien, zum Teil auch mit Biokompatibilitätstest
- Tragbar mit Verbandmaterial
- Minimalisierung des Tromboembolie-Risikos

Sonderanfertigungen

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser
- Weitungen auf den Leisten (mehr Maß als Weite WW, Hallux valgus oder Krallenzehen)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

Indikationen

Zehenarthroplastik (besonders bei Hallux valgus und Hammerzehen), Korrekturosteotomien der Zehen und Mittelfußknochen, AVK Stad. IV, Diabetischer Fuß (Osteolysen, Ulcerationen), postoperative Phase nach Zehen- und Vorfußamputationen, Zehenfrakturen, übungsstabile Zehen- und Mittelfußosteosynthesen, Weichteileingriffe des Vorfußes

Rezeptierung

1 Verbandschuh Langzeit (Heilbronner Abrollschuh) CuraPro (DIABETICUS+RHEUMATICUS®)

Bitte benutzen Sie die hier aufgeführte Brandsohlenschablone zur Feststellung der richtigen Größe!

Leisten 990	35 - 42	41 - 48	DAMEN HERREN	BREISGAU, HEIDELBERG, HEILBRONN MARKGRÖNINGEN	Brandsohlenumriss Heilbronner Abrollschuh, Wundnetz
-----------------------	----------------	----------------	-------------------------------	--	---



Durch die Fertigung für **links und rechts** ergibt sich eine bessere Passform und ein schnelleres Abheilen der Wunden.



1	HEIDELBERG 990 4.2027 • links 4.2028 • rechts Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.) schwarz Haftflex (Biokompatibilitätstest) thermoplastische Hinterkappe
2	HEILBRONN 990 4.2020 • links 4.2021 • rechts Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.) schwarz Haftflex (Biokompatibilitätstest) thermoplastische Hinterkappe

3	BREISGAU 990 4.2025 • links 4.2026 • rechts Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.) schwarz Vectra (Biokompatibilitätstest) thermoplastische Hinterkappe
4	MARKGRÖNINGEN 990 4.2035 • links 4.2036 • rechts Gr. 35/36 bis 45/46 (Doppelgr.) oliv/schwarz Space/Hydro-Micrella thermoplastische Hinterkappe

5	POLYETHYLEN-EINLEGESOHLE 4.4007 Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.)
6	POLYETHYLEN-EINLEGESOHLE MIT NEOPRENBEZUG 4.4006 Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.)

Entwickelt in Zusammenarbeit mit OA Dr. P. Bause, Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, SLK-Kliniken Heilbronn GmbH



Wundnetz

(Verbandschuh Langzeit mehrmonatige Verwendung)

Durch die Fertigung für **links und rechts** ergibt sich eine bessere Passform und ein schnelleres Abheilen der Wunden.

Indikationen

Postoperative oder sonstige Wundprozesse, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. auch gepolsterten Verbänden, deren Heilungsverlauf über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt.

Links und rechts einzeln lieferbar.



Rezeptierung

1 Verbandschuh Langzeit

CuraPro (DIABETICUS+RHEUMATICUS®) (Wundnetz)

1	WUNDNETZ "M" 900 4.2030 • links 4.2031 • rechts Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.) schwarz Haftflex (Biokompatibilitätstest) thermoplastische Hinterkappe
----------	---

2	WUNDNETZ "W" 990 4.2032 • links 4.2033 • rechts Gr. 35/36 bis 47/48 (Doppelgr.) schwarz Haftflex (Biokompatibilitätstest) thermoplastische Hinterkappe
----------	---

Bitte benutzen Sie die hier aufgeführte Brandsohlenschablone zur Feststellung der richtigen Größe und Weite!

Leisten 900	34 - 42	41 - 48	DAMEN HERREN	WUNDNETZ "M"	Brandsohlenumriss Fersenentlastungsschuh, Verbandschuh Langzeit
	SS, S, M				
Leisten 990	35 - 42	41 - 48	DAMEN HERREN	WUNDNETZ "W"	Brandsohlenumriss Heilbronner Abrollschuh, Wundnetz

Therapieschuhe



Durch die Fertigung für **links und rechts** ergibt sich eine bessere Passform und ein schnelleres Abheilen der Wunden.



Kletten abnehmbar

Zur Prophylaxe bei Langzeitlagerung und Ulcuslagerung. Das Material Haftflex ist beschneidbar und waschbar.

1	CAMPANILE 950 4.1637 • links 4.1638 • rechts Gr. 34-47 oliv Space Sohle: Race schwarz
----------	--

2	CAMPINO 950 4.1635 • links 4.1636 • rechts Gr. 34-47 schwarz Haftflex (Biokompatibilitätstest) thermoplastische Hinterkappe Sohle: Race schwarz
----------	---

3	BETTLAGERUNGSSCHUH (DEKUBITUS) 4.1615 • links/rechts Gr. 34-38, 39-42, 43-47 einballig (einzeln lieferbar) schwarz Haftflex mit 20 mm Polster
----------	---

Bitte benutzen Sie die hier aufgeführte Brandsohlenschablone zur Feststellung der richtigen Größe!

Leisten 950	34 - 42	41 - 47	DAMEN HERREN	CAMPANILE CAMPINO	Brandsohlenumriss Therapieleisten
-----------------------	----------------	----------------	-------------------------------	------------------------------------	---

Personenkreis

Spezialsocken für Damen und Herren

Farben

In 5 verschiedenen Farben erhältlich:
weiß, beige, marine, grau, schwarz

Größengang

- 35 bis 38
- 39 bis 41
- 42 bis 43
- 44 bis 45
- 46 bis 47

Materialzusammensetzung

- 80 % Baumwolle
- 20 % Polyamid

Besonderheiten

In 2 Ausführungen lieferbar

- a) dick mit Frottee
- b) dünn

- Maschinenwaschbar bis 60°C,
sorgfältig ohne Weichspüler nachspülen
- Medizinprodukt der Klasse I MDR Anhang VIII,
Anwendung MDR Anhang IV mit CE-Kennzeichnung
- Klinisch geprüft

Sonderanfertigungen

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen
in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Mit individuellem oder ohne Schriftzug
- Gewendet gefertigt (Nähte nach außen)
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder
der Rückgabe ausgeschlossen
- Individuell nach Maß





Spezialsocken

GRÖSSEN	1 weiß	2 beige	3 marine	4 grau	5 schwarz
35 - 38	5.3000 dick 5.3100 dünn	5.3010 dick 5.3110 dünn	5.3030 dick 5.3130 dünn	5.3040 dick 5.3140 dünn	5.3020 dick 5.3120 dünn
39 - 41	5.3001 dick 5.3101 dünn	5.3011 dick 5.3111 dünn	5.3031 dick 5.3131 dünn	5.3041 dick 5.3141 dünn	5.3021 dick 5.3121 dünn
42 - 43	5.3002 dick 5.3102 dünn	5.3012 dick 5.3112 dünn	5.3032 dick 5.3132 dünn	5.3042 dick 5.3142 dünn	5.3022 dick 5.3122 dünn
44 - 45	5.3003 dick 5.3103 dünn	5.3013 dick 5.3113 dünn	5.3033 dick 5.3133 dünn	5.3043 dick 5.3143 dünn	5.3023 dick 5.3123 dünn
46 - 47	5.3004 dick 5.3104 dünn	5.3014 dick 5.3114 dünn	5.3034 dick 5.3134 dünn	5.3044 dick 5.3144 dünn	5.3024 dick 5.3124 dünn

Mischung aus
80 % Baumwolle und
20 % Polyamid

Hautverträglich

Waschbar bis 60°C

Die Nähte wurden auf ein Minimum
reduziert und sind kaum wahrnehmbar.


Durch die Verarbeitung mit wenig
Gummianteilen hat der Socken keinen
einschneidenden Gummirand.

Maßangaben für Sonderanfertigungen

U: Beinumfang

L: Schaftlänge

F: Fußlänge

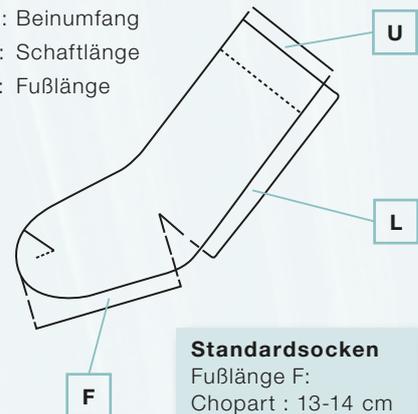

Standardsocken

Fußlänge F:

Chopart : 13-14 cm

Lisfranc : 19-20 cm



Amputationssocken

GRÖSSEN	1 weiß	2 beige	3 marine	4 grau	5 schwarz
35 - 38	5.3200 dick 5.3300 dünn	5.3210 dick 5.3310 dünn	5.3230 dick 5.3330 dünn	5.3240 dick 5.3340 dünn	5.3220 dick 5.3320 dünn
39 - 41	5.3201 dick 5.3301 dünn	5.3211 dick 5.3311 dünn	5.3231 dick 5.3331 dünn	5.3241 dick 5.3341 dünn	5.3221 dick 5.3321 dünn
42 - 43	5.3202 dick 5.3302 dünn	5.3212 dick 5.3312 dünn	5.3232 dick 5.3332 dünn	5.3242 dick 5.3342 dünn	5.3222 dick 5.3322 dünn
44 - 45	5.3203 dick 5.3303 dünn	5.3213 dick 5.3313 dünn	5.3233 dick 5.3333 dünn	5.3243 dick 5.3343 dünn	5.3223 dick 5.3323 dünn
46 - 47	5.3204 dick 5.3304 dünn	5.3214 dick 5.3314 dünn	5.3234 dick 5.3334 dünn	5.3244 dick 5.3344 dünn	5.3224 dick 5.3324 dünn



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Donau, Telefon +49 (0) 90 74/95 51-0, Telefax +49 (0) 90 74/95 51-50
E-Mail: info@thanner-gmbh.com, Internet: www.thanner-gmbh.com, Onlineshop: www.thannershop.com
www.facebook.com/thanner.de